

DS-43S / Kenon-A-01 カメラ設定の初期化について


検温アラームシステム DS-43Sシリーズ / Kenon-A-01シリーズ で、サーモグラフィーカメラの設定が自動的に初期化されることがあります。

以下のような症状が出ている場合は、設定が初期化されている可能性があります。

- ・画面上に緑の三角形の警告が表示される
- ・テキストの表記が英語以外で表示される
- ・サイネージディスプレイ側の表示がホワイトアウトする
- ・カメラの電源が自動的に切れる

設定が初期化されている場合は、以下を参考に再設定を行ってください。

サーモグラフィーカメラ各部名称・操作方法

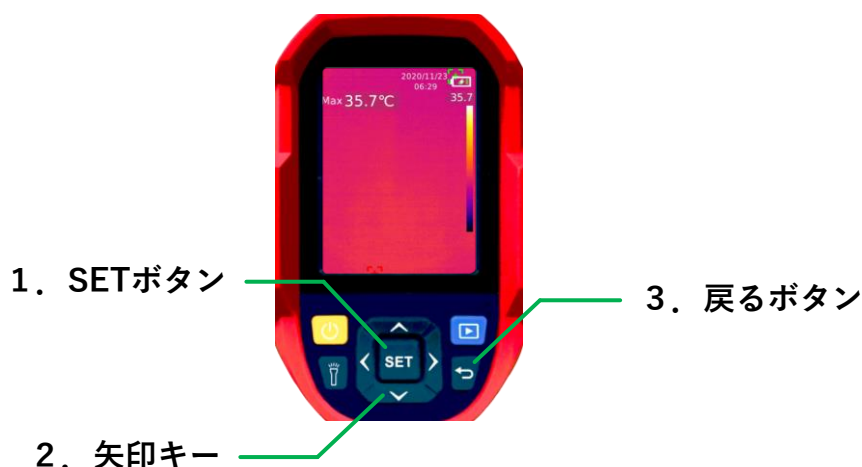

1. SETボタン

メニューを開く・決定するのに使用します。

2. 矢印キー

メニューを選択・数値等を上下するのに使用します。


3. 戻るボタン

一つ前のメニューに戻るのに使用します。

DS-43S / Kenon-A-01 カメラ設定の初期化について

設定方法

通常画面でSETボタンをしてメニューバーを開きます。

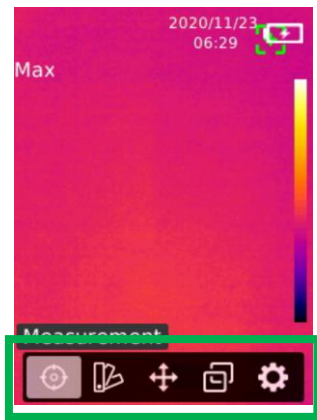

Measurement

通常はHiLo spotを選択します。

測定範囲を制限する場合はROI (Region of Interest) を選択します。（バージョンによっては機能がありません。）

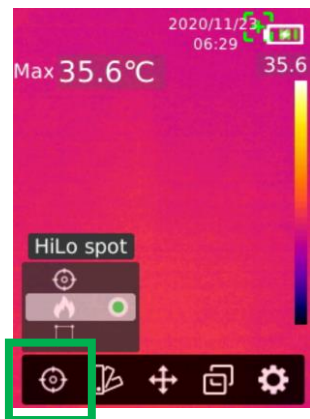


Image Mode

熱分布表示にする場合はThermalを選択します。


光学カメラ表示にする場合はDigitalを選択します。



DS-43S / Kenon-A-01 カメラ設定の初期化について

設定方法

Settingsを開きます。

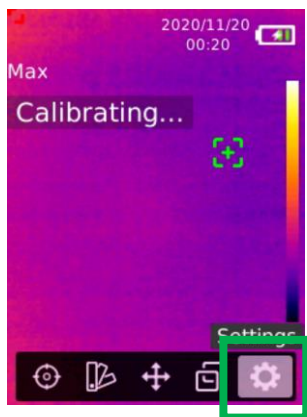

Language


Englishに設定します。



HI/LO Alert

HIをOn、LOをOffに設定します。


HIにアラームを起動させるしきい値を設定します。

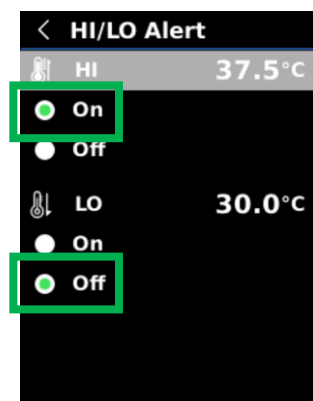

DS-43S / Kenon-A-01 カメラ設定の初期化について

Measurements

Emissivityを0.98に設定します。

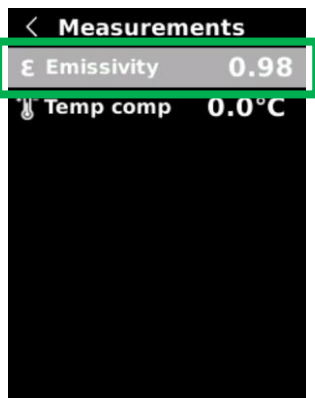

Auto power off

OFFに設定します。

